

お薬取出器

トリダスPROプラス
T O - 2 0 0 シリーズ
取扱説明書



大同化工株式会社

◆ はじめに ◆

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。

この製品の厳重な品質管理と製品検査を経て出荷しておりますが、万一不具合等ございましたらお買い上げの販売店または弊社までお問合せ下さい。

＜特長＞

- PTPシートのお薬を分包機の錠剤マスに直接投薬できます。

＜仕様＞


製品名	トリダスPROプラス	
型番	T O - 2 0 0	
サイズ	縦92×横166×厚み26 (mm)	
重量	54 g	
材質	ハンドル	強化PC
	レバー	強化PC
	カバーガイド	PP
	ロート	PC
対応錠剤	直径5mm～10.5mm程度	
対応カプセル	0号～5号	
耐熱	60度以下	

⚠ ご注意点

錠剤の種類によっては対応できない物や、破損する場合がございます。またPTPシートの材質によってはシートのフィルムやアルミ箔の破損による破片やその他の異物混入がないか必ずご確認ください。



レバーを引く際にはなるべくまっすぐになるように引いて下さい。数万回レバーを斜めに引くと破損する可能性もございます。

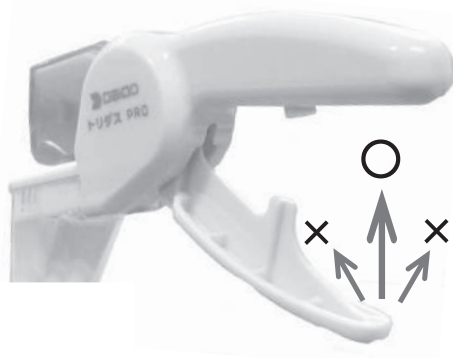

＜本製品をご使用の前に＞

- この製品を正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みになってからご使用下さい。またこの「取扱説明書」はいつも手元に置いてご使用下さい。ご使用中にわからないことや、不具合が生じた際にはこの「取扱説明書」を読み直すか、弊社までお問合せ下さい。
- 弊社は、本製品の使用誤り、ご使用中に生じた故障、そのたの不具合または本製品の使用によって受けられた損害については、法律上賠償責任が認められている場合を除き、一切その責任を負いません。
- 本製品をたたいたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、落下させるなどの衝撃や力を与えないで下さい。万が一余分な力が加わった場合には、本製品に破損や亀裂がないかご確認ください。修理を行うかお買い換えを行って下さい。また、破損や亀裂がありご使用して怪我等がございましたら一切の責任は負い兼ねます。
- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日から6カ月以内の保証期間内であれば、本体部分に限り無償修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には、ご法人名と電話番号をお申し出下さい。
- お薬の誤飲防止のため、この製品はお子様の手が届かないところに保管して下さい。
- ご使用頻度の目安は5万回ご使用後は消耗します。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承下さい。

daido 大同化工株式会社


〒570-0002

大阪府守口市佐太中町4-19-15

TEL 06-6901-1855 FAX 06-6901-1910

大同化工株式会社 <https://www.daido-kako.com/>

1. 各部の部品名とはたらき

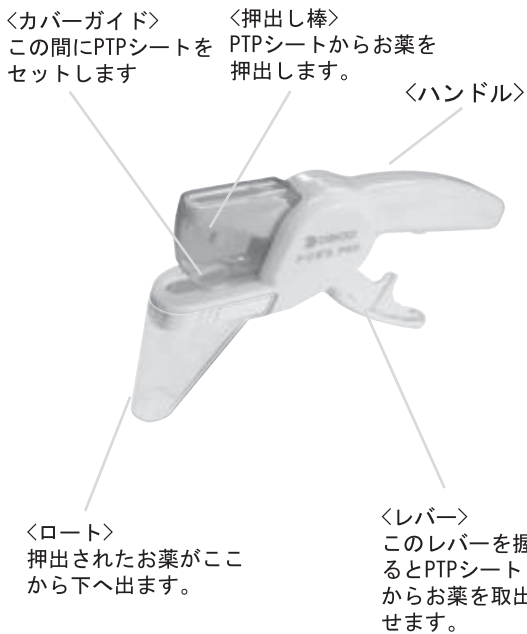

※PTPシートとは・・・お薬の包装のなまえです。
指でお薬を押し出せるシートのこと

2. セット方法

＜錠剤の場合＞



＜カプセルの場合＞



カバーガイドの間に錠剤・カプセルが
入るようしっかり奥までセットします。

○ 良い例



× 悪い例



3. ロートの外し方



スライドして外す

ロート取外し可能！ ロート部水洗い可能！

①左手人差し指でロック部
を押さえる。



②右手でパイプをスライド
させて外す。



※左利きの方は①を右手で
②を左手を使って下さい。

4. 錠剤・カプセル落とす方法

①PTPシートから取出したお薬を分包機の
錠剤マスに直接まくことができます。



②PTPシートから取出したお薬を
容器などに落とす。



左記の商品
大同化工社製
錠剤配分器ケース
ステルスケース ミニ HS-002