


プチはんぶんこⅡ

HC-002

取扱説明書

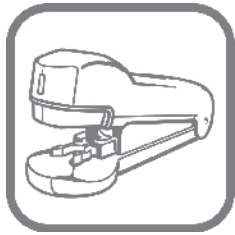

☆本製品は刃物を使用しています。
ご注意ください。

〈仕様〉

品名	プチはんぶんこⅡ	
品番	HC-002 (V), (O), (P)	
寸法	108 × 34 × 33 (mm)	
重量	40g	
材質	本体	ベース・カバー ABS樹脂 スライダー POM樹脂 ブレードケース PP樹脂
	刃	0.5mm特殊硬質刃
対応錠剤	Φ 4mm ~ 13mm 程度	
付属品	分割錠用ブレードケース 1個	
別売替刃	ブレードケース替刃	

※本製品は予告なく仕様変更することがあります。

DAIDO 大同化工株式会社
〒570-0002
大阪府守口市佐太中町4丁目19番15号
TEL 06-6901-1855 FAX 06-6901-1910

◆ はじめに ◆

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有難うございます。本製品は厳重な品質管理と製品検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がございましたらお買上の販売店または弊社までご連絡下さい。

安全にお使いいただくために



注意

- 【本製品をご使用前に】
- 本製品で錠剤を半錠にする際は必ず医師・薬剤師にご相談の上ご使用下さい。ご相談がない場合貴方の健康を失う恐れがありますのでご注意ください。
 - 本製品を正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みになってからご使用下さい。
 - 弊社は、本製品の使用誤り、ご使用中生じた故障、その他の不具合、また本製品使用によって受けられた損害については、一切責任を負いません
 - ご使用後は刃を清潔にして、残薬がないことをご確認して下さい。刃のお手入れは綿棒などを使って怪我しないようご注意ください。
 - 本製品で錠剤が正確に半分にならない場合は薬の飲用を中止して下さい。
- 【ご使用上の注意と保管】
- お薬の作用に影響がある薬剤、カプセル・コーティング錠・三層錠・腸溶錠・楕円錠等には使用しないで下さい。
 - 本製品はお子様の手の届かないところに保管して下さい。
 - 錠剤が上手く切れなくなったら刃を交換して下さい。

【替刃について】

カット後錠剤破損や切れが悪くなりましたら刃を交換して下さい。

- ブレードケース替刃 HC-C1 / 5ヶ入
定価 1,860円 (税別)



- 分割錠用ブレードケース / 1箱 3ヶ入
定価 900円 (税別)



☆刃に発生する錆について

刃に塗布してある錆止めがとれてしまうと、錆が発生します。しかし、使用後に適切な手入れ（清拭など）を行うことで、錆防止になります。ご使用後は綿棒などで刃に付着した錠剤の粉を拭きとって下さい。

1. 各部の名前とはたらき

(ブレードケース替刃)

錠剤をカットする刃が入っています

(V溝：ブイみぞ)
中心を取るため錠剤を挟むように置きます

(ベース)
V溝の間にPTPシートを挟みこみます

(ストラップホール)
市販のストラップを取付けられます

(スライダー)
スライドさせることでロック操作ができます
(安全のため少々硬めに設定しています)

2. 持ち方


親指と人差し指でつまむように持って
残りの指を添えます



人差し指の腹で円の中心を押さえます。

ロック操作について

かならず本体を閉じてロックしてください。

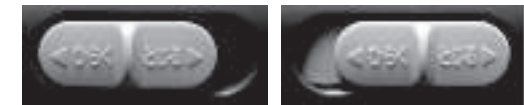

使用する状態



ロックした状態

3. 基本的な使い方

①PTP包装のままカットする



V溝に軽く当てます。
押し込みすぎに注意!



中心を確認の上ヘッドの中心をしっかり押さえてカットします



PTP包装のままカットできます




錠剤を取出す場合は切り目によって山折に



表面から簡単に取出せません
(裏面は破れません)

②バラ錠のままカットする

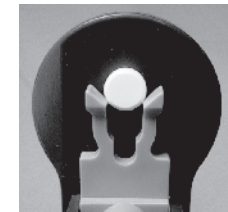

そのままV溝にセットします



上から覗き込んだところ



バラ錠がカットできます

<注意点>

- ・錠剤がV溝の両側に当たるようにセットします
- ・錠剤が斜めになってないか確認します
- ・断面が楕円形の錠剤は特に注意が必要です

③分割錠をカットする



●分割錠用ブレードケースに交換する*下記参照

PTP包装のまま、しっかり押さえて分割します
*錠剤の表裏関係なく分割可能

PTP包装の中で分割できます

通常どおり押し出し錠剤を取り出します。

分割錠(チョップ錠、かわら錠)とは・・・(右図参照)

●錠剤を上から強く押さえると分割可能な錠剤です。


対応分割錠

●アムロジン5mg、カルデナリン4mg、コニール4mg、コニール8mg
ニューロタン50mg、ノルバスク5mg

対応不能分割錠

●カルデナリン1mg、カルデナリン2mg

分割錠 図

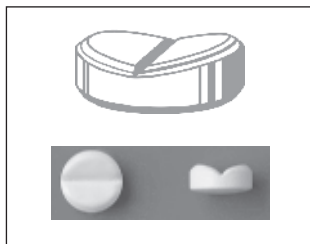

4. 替刃・分割錠用ブレードケース(以下分割錠B)の交換について


①新しい替刃or分割錠用Bを用意する




②本体を開く




③ストッパーを押しながら

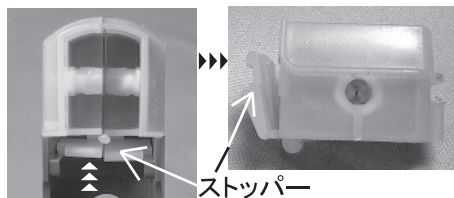

④替刃を引き上げて

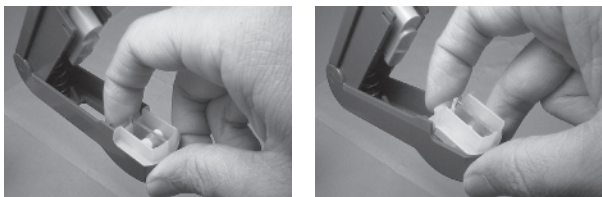


⑤替刃を外す

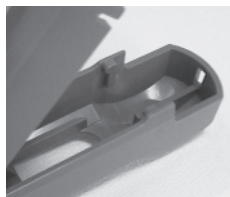

⚠ **注意** 刃を触らないように気をつけてください。

⑥新しい刃を差込み ⑦そのまま押込む

⑧本体を閉じる

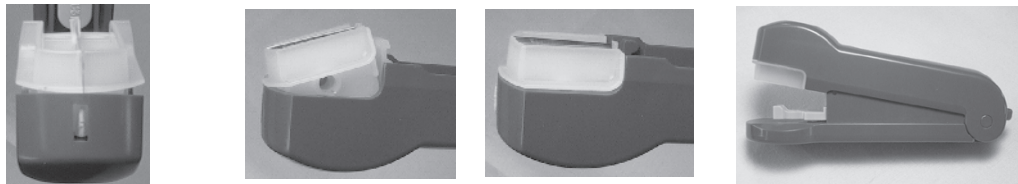


溝に入れながら


⚠ **警告** 刃を触らないように気をつけてください。

<使い方の注意点>

☆包装状態の中で錠剤が動く場合
等分できないことがあります。
その場合は包装から出して
バラ錠でカットして下さい。
包装状態のままカットする場合は
錠剤を押さえて動きを止める
為にフィルム部を潰して下さい。

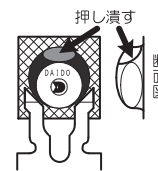


☆割線のある錠剤について
基本的には割線を無視して切ります。
もし、割線どおりカットする場合は包装から
取出して割線に沿って刃が入るようセットし
て下さい。

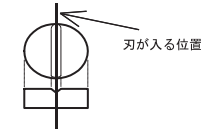

☆対応できる錠剤サイズ

直径4mm~13mmの範囲の錠剤。
包装状態の場合は包装サイズと
して判断して下さい。

*右図はバラ錠の目安です

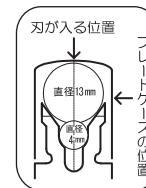

☆やわらかい錠剤など
半錠で崩れる錠剤もあります。

☆替刃の交換時期

使用方法、錠剤の材質により異なります。
目安としては、錠剤の切り口が砕けるよう
になったら交換して下さい。

錠剤配分用ケース

「ステルスケースミニ」

錠剤を分包機に投入する
ときなどに便利です



製品名 ステルスケースミニ HS-002
定 価 1,980円(税抜)